




HEKA
a division of Harvard Bioscience, Inc.



UPGRADE your EPC10 Patch Clamp Amplifier to an **EPC10 USB**

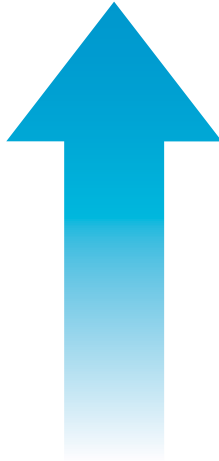

BENEFITS

- ご使用頂いている古いEPC-10アンプで、内部ITC-1600インターフェース(光通信)を用いている製品は、最新バージョン及び次期バージョンのソフトウェアをご利用出来ません。
- アップグレード後は1年間の保証付です。

- バージョンアップでは、ITC-1600のインターフェース(光通信) ⇒ LIH8+8 (USB通信) への交換となります。
- チャンネル数/各種レンジ/サンプリングレートは変更なし
- アップグレードの対象となるのは、お使いのアンプがバージョン”J”以降であること。

※バージョンの確認方法は、PATCHMASTERを起動し、上部スクリーンショットのとおりEPCアンプメニュー下部より確認可能です。



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
 福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208 TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353

HEKA • email: sales@heka.com • www.heka.com

